



Руководство по эксплуатации
зубной щетки - ирригатора

Xiaomi Soocas Neos Electric Toothbrush

для клиентов интернет-магазина
«Mi-Home»

Благодарим за выбор **Xiaomi Soocas Neos Electric Toothbrush**



Внимательно прочитайте это руководство и ознакомьтесь с правилами эксплуатации электрической зубной щетки Soocas Neos.

Меры предосторожности

При первом использовании изделия может наблюдаться легкий дискомфорт и незначительное кровотечение из десен. Причина таких последствий заключается в том, что десны не привыкли к методу чистки с применением вибрации. Начинающим пользователям рекомендуется установить мягкий (деликатный) режим. Дискомфорт при чистке может продолжаться в течение 1 – 2 недель. Если кровотечения продолжаются дольше 2-х недель, немедленно прекратите пользоваться изделием и обратитесь за профессиональной помощью к зубному врачу.

- Пользователям коррекцией зубного ряда, зубными имплантами и т. д. рекомендуется пользоваться изделием под руководством зубного врача или врача общей практики.
- Это изделие соответствует стандартам безопасности электромагнитных устройств. При наличии проблем, связанных с вживленными сердечными стимуляторами или другими имплантируемыми устройствами, прежде чем использовать изделие, обратитесь за консультацией к врачу или производителю импланта.
- Это изделие предназначено исключительно для чистки зубов, десен и языка. Не используйте его с какой-либо другой целью. Если возникает дискомфорт или болевые ощущения, прекратите использование изделия и обратитесь за профессиональной помощью к зубному врачу или врачу общей практики.
- Не погружайте зарядное устройство в воду или какую-либо другую жидкость.
- Не вставляйте электрическую вилку зарядного устройства в источник питания, если на вилке есть какая-либо жидкость.
- Изделие оснащено встроенным аккумулятором. Не бросайте его в огонь и не выполняйте зарядку в условиях высокой температуры.
- Не стучите по изделию и не роняйте его. Если изделие повредилось в результате столкновения с чем-либо или после падения, перестаньте использовать устройство.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.
- Это изделие не подходит для лиц с физическими, сенсорными или умственными недостатками, а также для лиц с недостаточным опытом и знаниями в области его использования (включая детей), за исключением случаев, когда такие лица пребывают под надзором или следуют указаниям лица, отвечающего за их безопасность.
- Не допускайте игр с устройством.
- Чистку и техническое обслуживание изделия не следует выполнять детям без присмотра взрослых.
- Для зарядки используйте безопасный и соответствующий требованиям адаптер питания.
- Прежде чем пользоваться изделием, проверьте его на наличие очевидных повреждений. Не используйте изделие, если оно повреждено или падало с большой высоты.
- Перед зарядкой убедитесь в том, что разъем и кабель для зарядки сухие. В противном случае может произойти удар электрическим током или короткое замыкание.



Меры предосторожности

- Изделие содержит встроенный аккумулятор, не бросайте его в огонь.
- Не располагайте изделие в среде с высокой температурой или в сыром месте, также не допускайте попадания на изделие прямых солнечных лучей.
- Зарядное устройство нельзя использовать вне помещения под прямыми солнечными лучами.
- Не пользуйтесь зубной щеткой, когда принимаете ванну или душ.
- Не используйте головку зубной щетки совместно с другими лицами. Не кладите металлические предметы на зарядное устройство, когда включено электропитание.
- Храните изделие при температуре от +5 °С до +35 °С и относительной влажности 20 – 75%.


Примечание: Иллюстрации изделия и аксессуаров приведены исключительно в справочных целях. В связи с улучшением и обновлением изделия фактический внешний вид может незначительно отличаться от иллюстрации (см. фактическое изделие).

Срок службы продукции указан в сопроводительной документации изготовителя.


Начало использования

1. Перед первым использованием зарядите изделие. Используйте адаптер для зарядки 5 В / 1 А.

Напоминание: зарядное устройство этого изделия специально изготавливается для данной модели и несовместимо с другими изделиями.

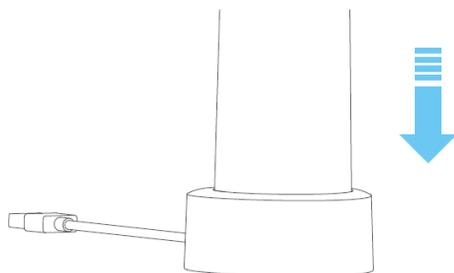


2. Убедитесь в том, что направление щетины головки зубной щетки выровнено относительно передней части ручки. После этого аккуратно наденьте головку зубной щетки на вал моторчика. Обратите внимание, что между головкой зубной щетки и ручкой будет небольшой зазор, необходимый для того, чтобы уменьшить трение двух деталей, возникающее в результате вибрации моторчика.

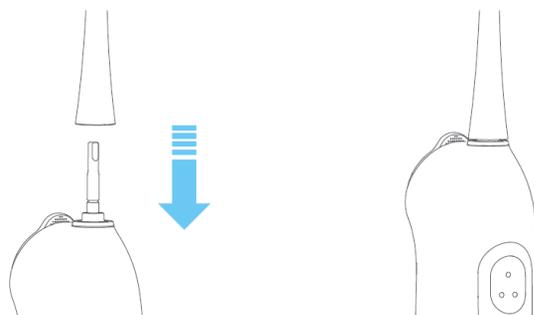




Начало использования

3. Намочите головку зубной щетки и выдавите на нее необходимое количество зубной пасты.

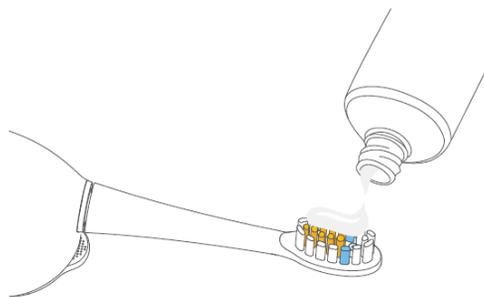


4. Выберите необходимый режим работы

- **Режим глубокой чистки:** выполните короткое нажатие, чтобы включить питание и инициировать режим глубокой чистки.
- **Выключить/пауза:** после включения питания выполните короткое нажатие, чтобы сделать паузу. Выполняйте долгое нажатие в течение 3-х секунд, чтобы выключить питание. Зубная щетка выключится автоматически, если пребывает в режиме паузы дольше 30 секунд.
- **Режим быстрой чистки:** выполните короткое нажатие, чтобы включить питание и инициировать режим быстрой чистки.
- **Кнопка интенсивности:** сделайте короткие нажатия, чтобы изменить степень интенсивности. Индикатор интенсивности будет также изменяться.

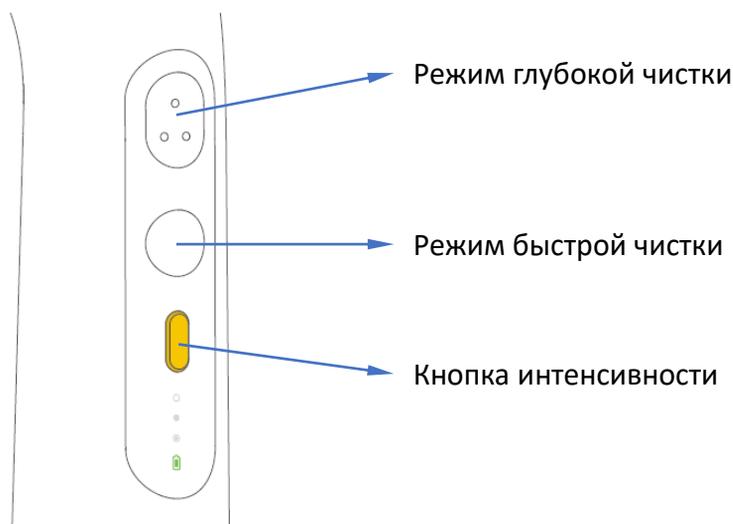

5. Режим глубокой чистки – метод чистки, когда сначала выполняется чистка зубов, а затем одновременно чистка зубов и межзубных промежутков. Подходит для утренней чистки зубов и десен.

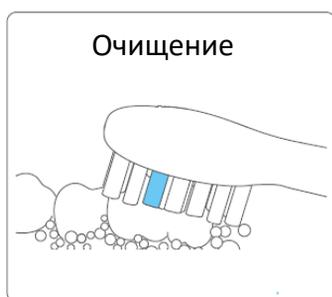



Начало использования

- **Режим быстрой чистки:** очищайте зубы и межзубные промежутки одновременно 30-50 секунд.


- **Кнопка интенсивности:**

Мягкий: режим для пользователей с повышенной чувствительностью зубов.


Стандартный: режим для повседневной чистки.

Сильный: режим для пользователей, которым требуется глубокая чистка.


Для тщательной чистки зубов расположите щетину под углом 45° относительно линии десен и медленно перемещайте головку зубной щетки.

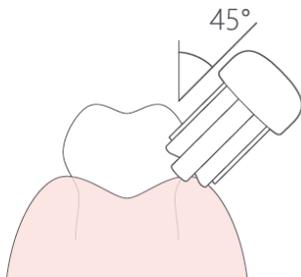

Избегайте приложения чрезмерного усилия, потому что это вредит зубам и деснам. Рекомендуется перемещать головку зубной щетки горизонтально короткими отрезками и позволить высокочастотной вибрации выполнить чистку.

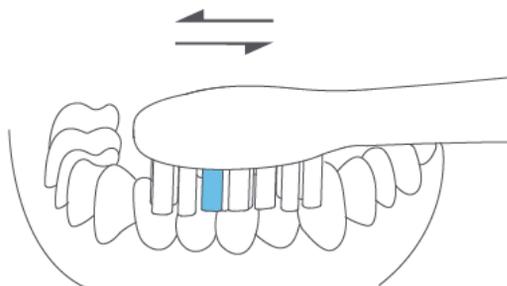

6. Пополнение воды в емкости: поднимите крышку емкости и налейте соответствующее количество воды. После этого переместите вниз крышку емкости для воды, затем выполняйте чистку зубов и межзубных промежутков.

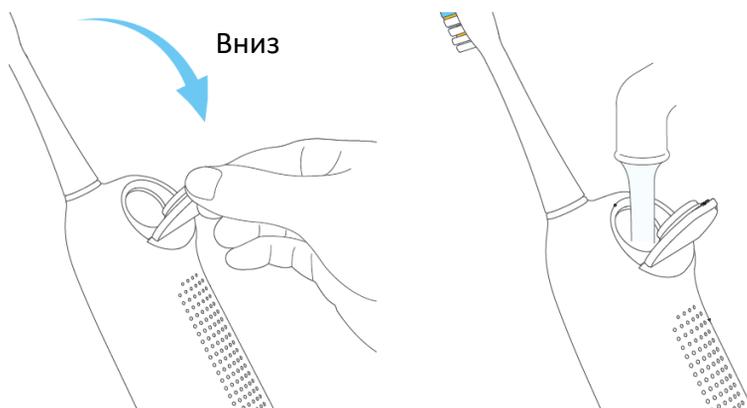





Начало использования

- Рекомендуется использовать воду температурой ниже 104°F (40°C).
- Чтобы не допустить закупоривания или повреждения, не смешивайте зубную пасту, соль, твердые таблетки ополаскивателя или какой-либо химический продукт, содержащий изопропилмиририлат.

Ежедневная чистка и техническое обслуживание

После чистки прополощите головку зубной щетки под водой.


Напоминание: рекомендуется менять головку зубной щетки каждые три месяца

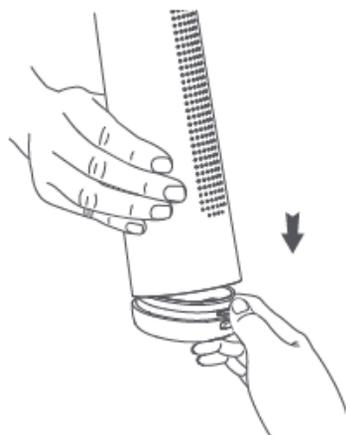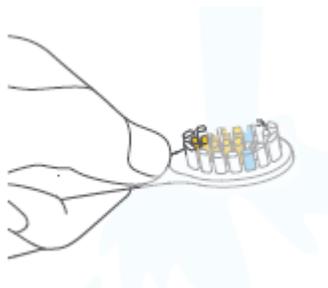

Держите корпус зубной щетки одной рукой и нажмите кнопку деблокирования в нижней части изделия, чтобы открыть емкость для воды. Вылейте оставшуюся жидкость.



При помощи щетки для очистки емкости для воды тщательно очистите внутреннюю часть корпуса, а затем высушите ее.

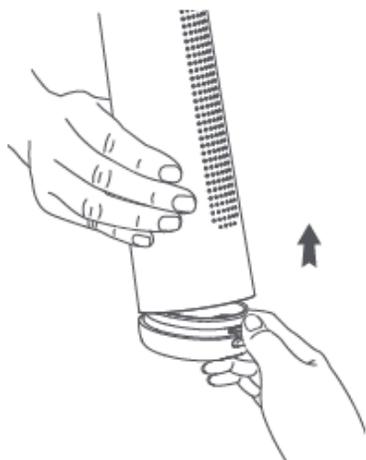

Выровняйте крышку, чтобы плотно закрыть емкость для воды



	Разъяснения по индикатору заряда аккумулятора	Остающийся заряд аккумулятора
При нормальной эксплуатации	Постоянно светится зеленый индикатор	30 – 100%
	Постоянно светится красный индикатор	10 – 30%
	Мигает красный индикатор	<10%
Во время зарядки	Постоянно светится зеленый индикатор	100%
	Мигает зеленый индикатор	30 – 100%
	Мигает красный индикатор	0 – 30%

• Когда индикатор заряда аккумулятора мигает красным светом, а изделие при этом включить не удастся, это говорит о том, что в изделии закончилась энергия и его необходимо зарядить. Для полной зарядки потребуется приблизительно 8 часов. Фактическое время зарядки варьируется и зависит от остающегося количества энергии аккумулятора.

Напоминание: выполняйте перезарядку при температуре 0°C – 45°C. Устройство не способно заряжаться при экстремально низкой температуре (ниже 0°C) и экстремально высокой температуре (свыше 45°C).

Протокол охраны окружающей среды

В соответствии с местным законодательством и нормативно-правовыми актами, когда срок службы изделия подходит к концу, пользователь должен извлечь внутренний аккумулятор и выполнить надлежащие процедуры утилизации и уничтожения, прежде чем выбрасывать детали. Если у вас возникли проблемы с извлечением аккумулятора, уничтожьте изделие в соответствии с местными нормативно-правовыми актами, разъясняющими порядок обращения с отходами.

Осторожно!

- Не бросайте аккумуляторы в огонь, чтобы не допустить взрыва аккумулятора или выброса ядовитых и вредных веществ.
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора, чтобы не допустить его возгорание и пожар.
- Если Вы не собираетесь выбросить изделие за ненадобностью, не разбирайте детали изделия, чтобы не повредить его.
- Необходимо соблюдать строгие правила техники безопасности. Прежде чем извлекать аккумулятор, следует отключить электропитание.





Осторожно!


- Прежде чем выбрасывать изделие за ненадобностью, из него нужно извлечь аккумулятор.
- При удалении аккумулятора питание изделия необходимо отключить.
- Аккумуляторы следует утилизировать безопасным образом.

Извлечение аккумулятора

1. При помощи плоской отвертки откройте колпачок на конце рукоятки.
2. Отсоедините крышку и с помощью плоской отвертки откройте внутренний моторчик. Вытолкните моторчик наружу.

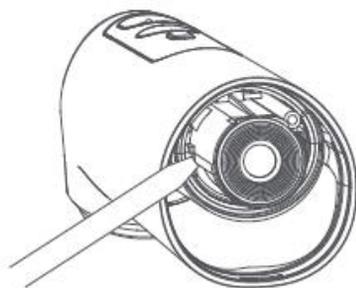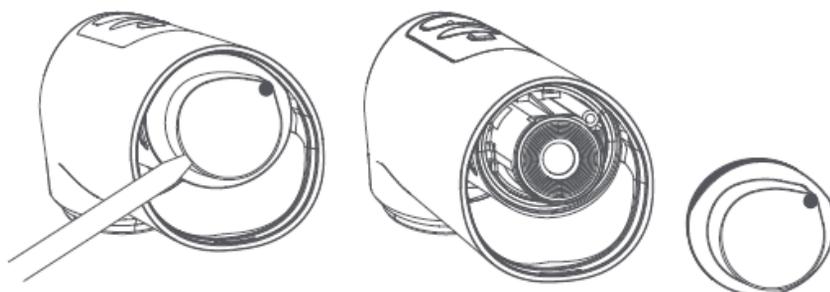

3. Обрежьте красные провода на внутреннем моторчике.

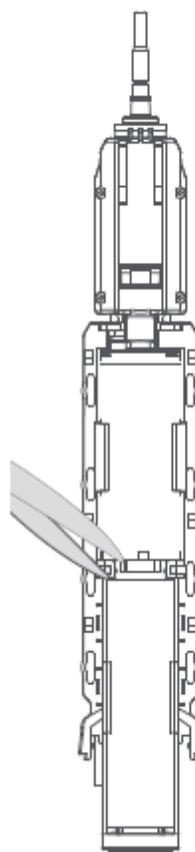

Модель: Soocas Neos

Мощность на входе: 5 В / 1 А

Время зарядки: 8 часов

Метод зарядки: беспроводной